

# Szafka zewnętrzna CABINAID ADVANCED

( do użytku zewnętrznego)

**CAB-02**


kod produktu

**Cab BV**

Producent

**Holandia**

kraj pochodzenia

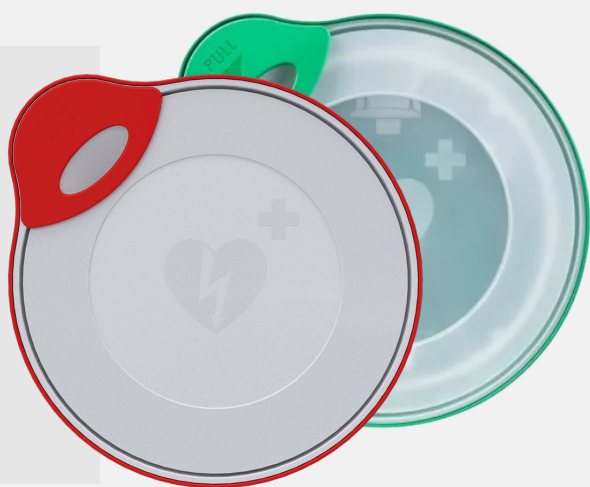

Szafki AED Cabinaid to idealne rozwiązanie do przechowywania defibrylatorów AED w warunkach zewnętrznych. Dzięki przestronnej konstrukcji, stałej głębokości i wystarczającej przestrzeni na dodatkowe akcesoria, szafka zapewnia optymalne warunki dla urządzeń AED. Cechy produktu:

- Szybkie otwieranie jednym ruchem – System szybkiego otwierania pozwala na błyskawiczny dostęp do AED. Wystarczy pociągnąć za uchwyt jedną ręką, by otworzyć szafkę i natychmiast uzyskać dostęp do defibrylatora.
- Kompatybilność z każdym AED – Szafka Cabinaid została zaprojektowana tak, by pasowała do wszystkich modeli defibrylatorów dostępnych na rynku, oferując przestrzeń nie tylko na urządzenie, ale również na akcesoria.
- Odporność na warunki atmosferyczne – Szafka Cabinaid doskonale sprawdza się w każdych warunkach atmosferycznych – zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, w gorącym, zimnym, wilgotnym czy zapyłonym środowisku. Sprawdza się w warunkach typowych dla klimatu w Polsce – jest odporna zarówno na mróz jak i temperatury do 40 stopni Celsjusza.
- Wyróżniający się design – Jaskrawe kolory i opcjonalne oświetlenie LED sprawiają, że szafka jest łatwa do zauważenia, nawet w ciemności. Dodatkowo, logo ILCOR AED zwiększa rozpoznawalność.
- Odporność i wytrzymałość – Certyfikat IK10 oznacza, że szafka jest odporna na uderzenia o energii 20 dżuli, co gwarantuje jej trwałość w trudnych warunkach. Klasa ochrony IP56 zapewnia odporność na pył i wodę, co sprawia, że szafka jest niezawodna niezależnie od miejsca montażu.
- Prosta w obsłudze i montażu – Szafka Cabinaid jest łatwa do zamontowania na dowolnej powierzchni, nie wymaga skomplikowanego systemu montażowego.



## parametry

Kod produktu: CAB-02

Wykonanie: HDPE , PP plastik, stal nierdzewna AISI 304  
Elementy konstrukcyjne: uchwyt, pokrywa, zawieszka, płyty dzielące, zamek – stal nierdzewna AISI 304.

Przeznaczenie: **na zewnątrz -  
temperatury od  
-20 do 40 stopni C**

Wymiar: Średnica: Ø 55 cm  
Średnica wew. Ø 48,5 cm  
Głębokość: 21,4 cm

Otwieranie: uchwyt

Odporność: IP56, IK10Plus

Waga: 5,8 kg



Cechy produktu:

Do użytku zewnętrznego w temperaturze od  $-20^{\circ}\text{C}$  do  $40^{\circ}\text{C}$ .

Szafka nadająca się na zewnątrz, do miejsc gdzie temperatura nie spada poniżej 20 stopni i nie jest większa niż 40 stopni w cieniu.

System automatycznie włącza ogrzewanie szafki, gdy temperatura spada poniżej poziomu bezpiecznego dla AED utrzymując stałą, dodatnią temperaturę.

Alarm wizualny po otwarciu.


Alarm dźwiękowy po otwarciu

Uchwyt na AED

Oświetlenie LED - AED jest na stałe oświetlone po zmroku, a po otwarciu światło zaczyna migać.



**CAB-02-Z**

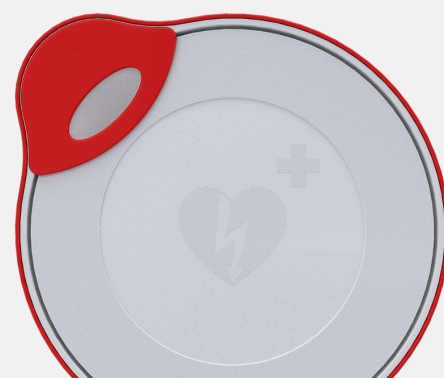

**CAB-02-R**



Łatwy  
montaż



Odpowiednia  
dla każdego  
AED



Doskonała  
izolacja



Ochrona  
przed  
kradzieżą

